



ZOYA
PARIS

INSTRUMENT DE LUMINOTHÉRAPIE POUR LE VISAGE

MANUEL UTILISATEUR ET INFORMATIONS
SUR LA GARANTIE

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté votre nouveau Zoya classic. Votre appareil Zoya classic utilise un ensemble de diodes électroluminescentes (LED) de longueurs d'ondes spécifiques pour délivrer des faisceaux concentrés de lumière proche infrarouge, rouge, bleue et orange afin d'obtenir des effets de photothérapie. Ces longueurs d'onde spécifiques des faisceaux lumineux vous offrent une expérience professionnelle de photothérapie faciale qui vous laisse avec une peau douce, lisse, ferme, propre, claire et radieuse.

Effectuez un simple test de sensibilité avant la première utilisation. Testez l'appareil sur une zone moins sensible, comme l'intérieur de votre bras, avant de commencer votre soin du visage, comme indiqué dans le «Guide d'utilisation». Attendez 24 heures et observez la zone testée. Si vous ne remarquez rien d'anormal (rougeur ou sensibilité de la peau), vous pouvez commencer à l'utiliser.

IMPORTANT

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'instrument et conservez-le pour référence ultérieure.

DANGER

- Maintenez l'instrument au sec. Ne l'immergez jamais dans l'eau.
- Ne chargez pas cet instrument dans un environnement humide (par exemple, près d'une baignoire remplie, d'une douche en marche ou près d'une piscine remplie).
- Ne jetez jamais l'instrument au feu.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas l'instrument, la pièce jointe s'ils sont endommagés ou cassés pour éviter les blessures.
- Chargez complètement l'instrument au moins tous les 2 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Cet instrument n'est pas recommandé pour les personnes de moins de 12 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions sur l'utilisation de l'instrument par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas insérer de matériau contenant du métal dans la prise de l'instrument pour éviter les courts-circuits.
- Les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas recommandées d'utiliser cet instrument.
- N'utilisez pas l'instrument à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Chargez, utilisez et stockez l'instrument à une température comprise entre -15°/4°C et 2/35°C.
- Ne pas utiliser l'instrument si vous prenez des médicaments à base de stéroïdes.
- N'utilisez pas cet instrument si votre peau est encore en phase de récupération après un traitement esthétique, tel qu'un peeling chimique ou mécanique, une resurfacing au laser, un traitement au laser fractionné ou une mésothérapie, ou tout autre traitement avec des remplisseurs cutanés au cours des deux dernières semaines.

GÉNÉRALE

- Un nettoyage régulier de l'instrument garantit des résultats optimaux et une durée de vie plus longue de l'instrument.
- Ne pas utiliser lorsque vous dormez ou êtes somnolent.

CONTRE-INDICATIONS ET AUTRES AVERTISSEMENTS

- Consultez votre dermatologue avant d'utiliser l'instrument de beauté Zoya classic.
- Ne pas utiliser l'instrument en cas d'acné sévère, nodulaire ou kystique.
- Ne pas utiliser l'instrument sur ou en contact avec une peau irritée ou ayant subi une intervention chirurgicale.

- Ne pas utiliser l'instrument sur des grains de beauté, des verrues, des poils incarnés ou une peau irritée.

- N'utilisez pas l'instrument si vous êtes particulièrement sensible aux tiraillements.

- N'utilisez pas l'instrument si vous avez pris un coup de soleil au cours des deux dernières semaines.

- N'utilisez pas l'instrument dans et autour de la zone des yeux et des extrémités. Ne pas utiliser l'instrument dans et autour de la zone des yeux et des extrémités, car cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures de la peau.

- Ne pas utiliser l'instrument plus de 2 minutes sur une seule imperfection. une utilisation excessive peut entraîner des lésions cutanées.

- La température de l'instrument ne dépassera pas 40°C s'il est utilisé à température ambiante, mais peut provoquer une gêne ou une rougeur prolongée.

- Si, après avoir utilisé l'instrument, vous constatez une aggravation de l'état de la peau (peau tendue, inconfortable, irritée, rouge, brûlante, etc.), des effets secondaires indésirables ou des rougeurs prolongées, arrêtez d'utiliser l'instrument et consultez votre médecin.

- Ne regardez jamais directement la lumière bleue, la lumière rouge et la lumière orange, car vous risqueriez de vous blesser les yeux.

- Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer avec l'instrument de beauté par thérapie lumineuse. L'instrument de beauté par thérapie lumineuse n'a pas été testé sur les enfants et peut provoquer des lésions cutanées telles que des rougeurs temporaires ou des changements de pigments (hypo- et hyperpigmentation) ou affecter leurs yeux.

- Les personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites doivent bénéficier d'une surveillance adéquate et d'instructions pour une utilisation en toute sécurité.

- Ne partagez pas l'appareil Zoya classic avec d'autres personnes.

- N'utilisez pas l'instrument s'il est visiblement endommagé et n'essayez jamais de l'ouvrir ou de le réparer, cela pourrait entraîner de graves blessures aux yeux ou à la peau.

- Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas utiliser cet instrument.

- Les personnes ayant eu une migraine au cours des deux dernières années ne doivent pas utiliser cet instrument.

- Ne pas utiliser sur une glande thyroïde car cela peut entraîner une stimulation de la croissance.

- Si vous prenez des médicaments ou des stéroïdes contre la douleur ou des affections cutanées qui provoquent une sensibilité à la lumière, l'utilisation de cet instrument peut entraîner une réaction de photosensibilité.


- Ne pas utiliser sur ou à proximité d'une injection de stéroïdes reçue au cours des six derniers mois, car cela peut entraîner une réaction photosensible.

- Afin d'éviter les incendies ou les brûlures graves, éteignez immédiatement l'instrument s'il commence à surchauffer, et tenez-le à l'écart des produits aérosols.

GUIDE DES FONCTIONS

Il est composé de trois modes : mode anti-âge, mode anti-acné et mode blanchissant, les trois modèles peuvent être commandés par un bouton.

*Arrêt automatique : L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation continue.

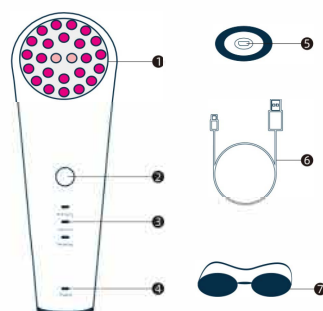

1. Tête lumineuse
2. Bouton marche/arrêt
3. Lumière d'indication des fonctions
4. Lumière d'indication de charge
5. Prise de charge
6. Ligne USB
7. Lunettes

MODE ANTI-ÂGE

Dans ce mode : Infrarouge proche + Lumière rouge :

Les longueurs d'onde du proche infrarouge peuvent pénétrer la peau humaine jusqu'à une profondeur de 5 à 10 mm, ce qui est plus profond que la lumière rouge. Avec la lumière rouge, le pouvoir de réparation multi-effet, la promotion de la régénération du collagène, l'amélioration de l'élasticité de la peau, l'amélioration des ridules des sillons nasogéniens est plus évident.



● Longueur d'onde (NM) : Near infrared - 830NM+/-3NM
● Longueur d'onde (NM) : Red light - 625NM+/-3NM

Étape 1 : portez d'abord les lunettes, appuyez sur le bouton d'alimentation, sélectionnez le mode anti-âge.

Étape 2 : appuyez sur la touche comme sur l'image, utilisez l'instrument pour toucher la peau et déplacez les boutons.

MODE ANTI-ACNÉ

Lumière bleue : anti-acné, nettoyage sensible, équilibre le sébum, resserre les pores.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL



Étape 1 : portez d'abord les lunettes, appuyez sur le bouton d'alimentation, sélectionnez le mode anti-acné.

Étape 2 : appuyez comme sur l'image, utilisez l'instrument pour toucher la peau et déplacer la friction.



● Longueur d'onde (NM) : Lumière bleue - 465NM+/-3NM

MODE BLANCHIMENT

Lumière orange : elle peut améliorer la micro-circulation de la peau, améliorer fondamentalement la rugosité et le teint terne, réduire la pigmentation et favoriser une peau plus claire et plus éclatante.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL



Étape 1 : portez d'abord les lunettes, appuyez sur le bouton power, sélectionnez le mode apaisant.



● Longueur d'onde (NM) : Lumière orange - 590NM+/-3NM

Étape 2 : appuyez comme sur l'image, utilisez l'instrument pour toucher la peau et déplacer la friction.



COMMENT CHARGER

1. Connectez l'ordinateur avec le câble USB, allumez l'ordinateur, connectez le câble de charge USB à la connexion d'alimentation USB du produit, et commencez à charger.

2. Utiliser l'adaptateur pour charger et connecter le câble USB à l'adaptateur.
3. La lampe brille lorsqu'elle est chargée, la lampe est brillante lorsqu'elle est pleine d'électricité.

ATTENTION : Avant de charger l'instrument, assurez-vous que le port de charge et le chargeur sont à l'abri de l'eau. N'utilisez PAS votre instrument pendant qu'il est en charge et ne le chargez pas pendant plus de 24 heures. N'utilisez jamais l'instrument s'il est endommagé.

NETTOYAGE DE L'INSTRUMENT

Remarques :

- Veillez à ce que l'instrument soit éteint avant de commencer le nettoyage.
- Veillez à ce que l'instrument soit débranché lorsque vous le nettoyez.
- Nettoyez l'instrument uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez jamais de tampons à récure, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs tels que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'instrument.
- Nettoyez soigneusement l'instrument et la sonde après chaque utilisation pour garantir des performances optimales.
- Ne rincez jamais l'ensemble de l'instrument sous l'eau. Assurez-vous que toutes les pièces soient sèches avant de les reconnecter à l'adaptateur.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Cet instrument est garanti pour une période de 2 ANS à compter de la date d'achat originale, contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Si vous découvrez un défaut et que vous nous le signalez pendant la période de garantie, nous procéderons, à l'entretien gratuit de l'instrument. La garantie couvre les pièces qui affectent le fonctionnement de l'instrument. Elle ne couvre PAS les détériorations purement esthétiques dues à l'usure normale ou les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'instrument (ou de ses accessoires) annulera la garantie.

Pour toute réclamation au titre de la garantie, il convient de fournir des preuves raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de garantie. Pour cette raison, veuillez conserver l'original de votre facture d'achat pendant toute la durée de la période de garantie. Pour la durée de la période de garantie.

ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas l'instrument avec les ordures ménagères à la fin de sa vie, mais remettez-le à un point de collecte officiel pour qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement.

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX PRINCIPAUX : Plastique ABS
DIMENSIONS : 170*56*36 mm
POIDS : Environ 125 g
BATTERIE : Li-ion 600 mAh 3.7 V
CHARGE : 110 min
UTILISATION : 100 min
VEILLE : 60 jours
INTERFACE : 1 bouton

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les utilisateurs de cet instrument le font à leurs propres risques. Ni nous ni nos revendeurs n'assumons de responsabilité en cas de blessures ou de dommages, physiques ou autres, résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de cet instrument. En outre, nous nous réservons le droit de réviser cette publication et d'en modifier le contenu de temps à autre sans obligation d'en informer qui que ce soit.

Veuillez nous contacter pour obtenir des informations plus complètes, y compris la mise à jour du guide utilisateur, les commentaires des clients, les questions fréquemment posées, etc.

